

**Signs**  
Included in the packaging of the BROEN-LAB emergency shower is the customer receives an international emergency symbol.  
This symbol must be placed where it is visible and where it clearly indicates the installation of an emergency shower.

**Instructions for Use**

- Start flushing immediately - the second count
- Remove contaminated clothing which is wet and dark to the skin
- Continuous flushing
- In case of an eye injury keep the eyelids open when continuing flushing
- Call for an ambulance. Advise the doctor the accident
- Continuous flushing in the ambulance
- Keep the flushing unit emergency personnel during transport to the special ward

**Do remember to inform all employees about:**

- How to prevent accidents
- How to react in an emergency
- The location of the emergency shower
- How to operate the emergency shower
- How to help injured persons in the best way

**Warning!**  
Before the installation of your BROEN-LAB emergency shower, all staff who is responsible for the safety of the product, and the system was found not to have been followed out, the warranty will be void.

**Warnung!**  
Vor der Installation einer BROEN-LAB Notdusche, müssen eventuell vorhandene Schutzvorrichtungen, die Unfälle verhindern verursachen können, aus dem Gefahrenbereich entfernt werden. Achtung! Personen, die auf eine nicht entlegene Spülung zurückzuführen sind, werden die Ersteller der Gefahrwarnungsschilder.

**Waarschuwing!**  
Voordat u de BROEN-LAB noodduchse installeert, moet u de eventuele beschermingsvoorzieningen, die ongeluk kan veroorzaken van het gebied, verwijderd worden. Personen die op een niet afgevoerde afvoer terug te voeren zijn, worden de Ersteller der Gevaar waarschuwingsplaatjes.

**Skilling**  
Alle BROEN-LAB nødbruser leveres med international nødbrusersymbol.  
Dette symbol skal placeres hvor det er synligt og tydeligt indikerer hvor der er installeret nødbruser.

**Brug af nødbruser**


- Start med at skylle øjeblikkeligt - sekundet tæller
- Fjern kontamineret tøj som er vådt og mørkt på huden
- Fortsæt med at skylle
- Hvis der er et øjenlæsion hold øjnene åbne samtidig med at du skifter
- Ring til ambulance. Sælg lægen tilfældet
- Fortsæt med at skylle i ambulance
- Hold øjnene åbne og under transport til specialiseret

**Husk at informere alle ansatte om følgende:**

- Hvordan man undgår ulykker
- Hvordan man skal forholde sig, hvis der sker ulykke
- Hvor nødbruseren er placeret
- Hvordan man bruger nødbruseren
- Hvordan man bedst hjælper en tilfældig person

**Advarsel!**  
Inden BROEN-LAB nødbruser installeres, skal alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der kan forhindre ulykker, fjernes fra området. Personer, der på en ikke afledt afledning af vand, vil blive frataget garanti af BROEN-LAB.

**Waarschuwing!**  
Voordat u de BROEN-LAB noodduchse installeert, moet u de eventuele beschermingsvoorzieningen, die ongeluk kan veroorzaken van het gebied, verwijderd worden. Personen die op een niet afgevoerde afvoer terug te voeren zijn, worden de Ersteller der Gevaar waarschuwingsplaatjes.

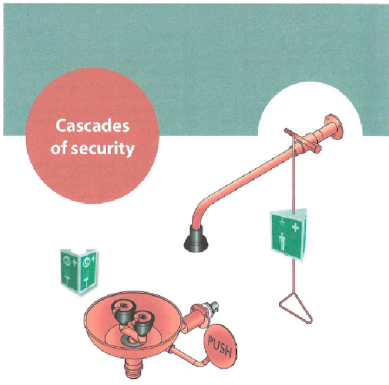


**BROEN-LAB Emergency Shower Systems**  
General instructions for emergency showers  
To be filled out by the installer and retained by the customer  
Generel instruktie om nødbruser  
Udfyldes af installatøren og opbevares af kunden

Installers signature / installatørs underskrift

www.BROEN-LAB.com

**BROEN-LAB**

**BROEN-LAB**

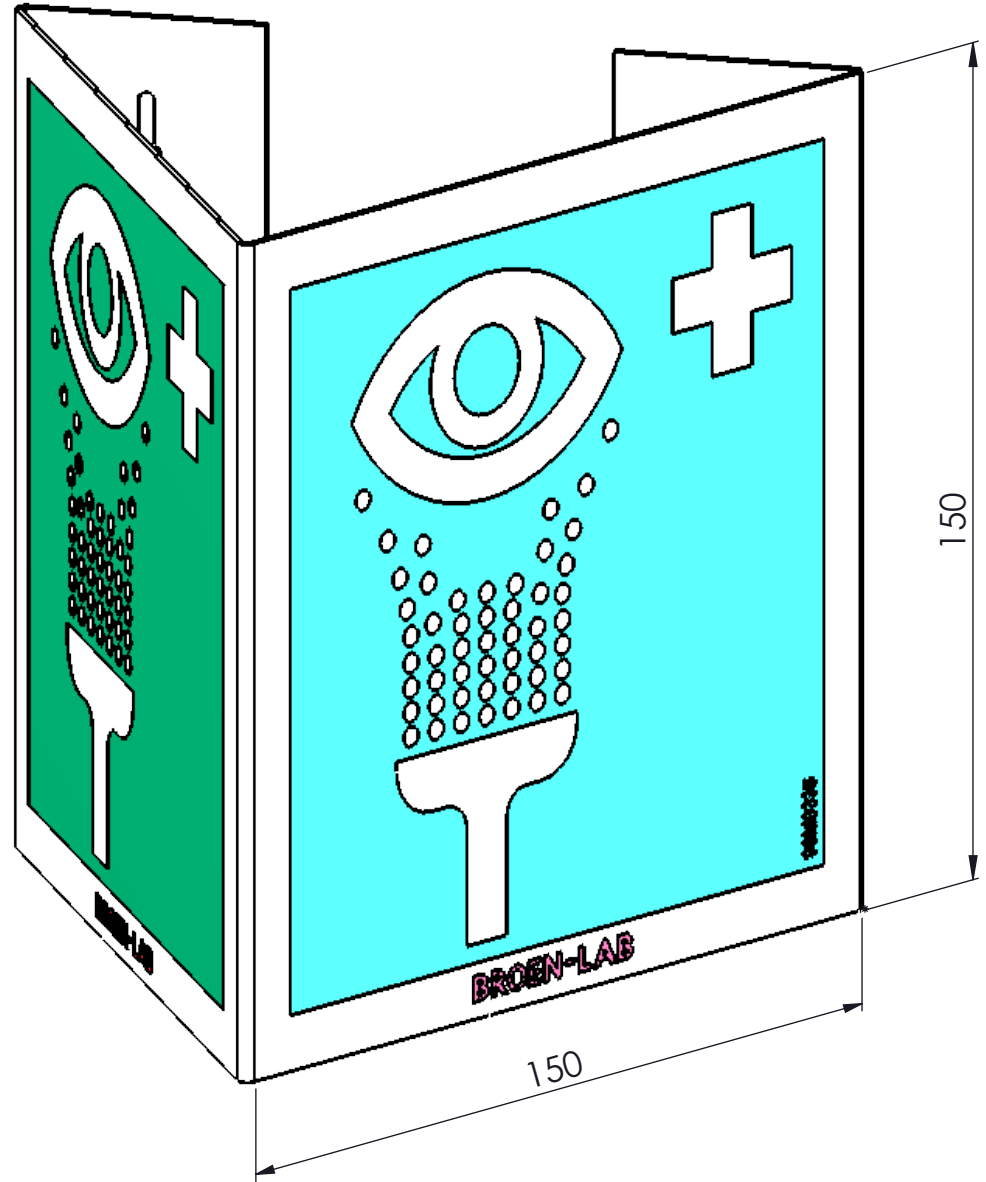

Description: Eye shower, handheld

Media:

Material:

Specification:

Comments:

Drawing type: Customer drawing

Weight: Kg

All dimensions marked with  are inspection dimensions

Unspecified linear tolerances:

Unspecified angular tolerances:

Designed by: KEC  
Drawn by: HEM

Released on TM No.

Date: 24-03-20

Format: A3  
Drawing No.:

17001970C

Rev.	Pos.	Date	TM No.	Design by	Drawn by	Change:
A		30-01-07	5086	Admin	Updatet signs	

**BROEN-LAB**

This drawing is our property and cannot be given to a third party, copied or otherwise used without our permission. BROEN-LAB A/S

